

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE


Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przemasadowych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.


WKRETY KANIULOWANE

3.1480.xxx
3.1481.xxx

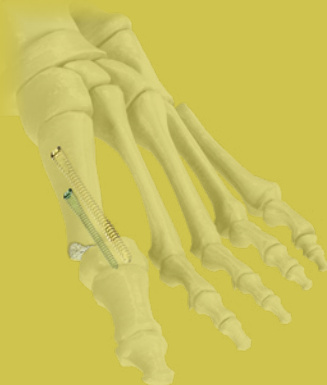

Dostarczamy rozwiązania
medyczne

ChM[®]
TRAUMA

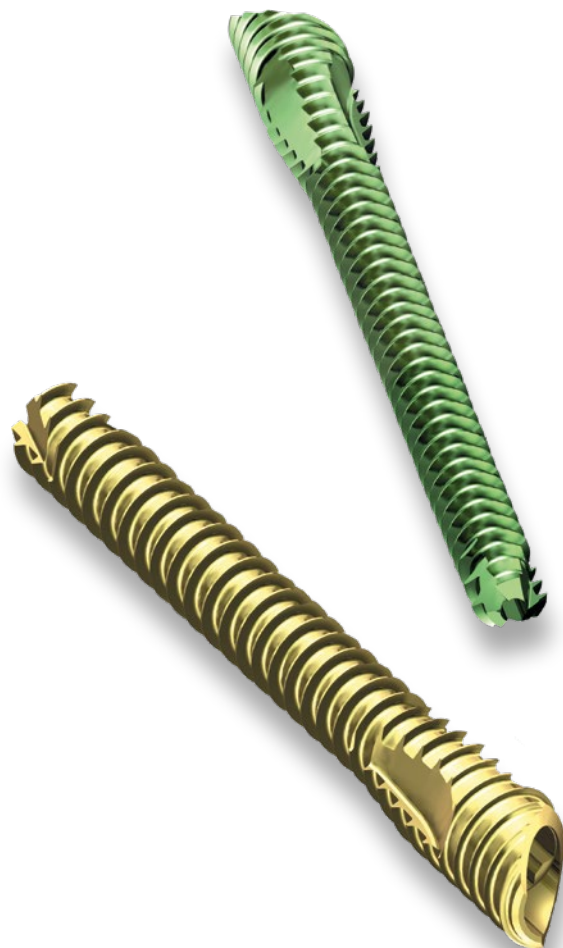

WKRETY KANIULOWANE

WKRĘTY KANIULOWANE

Szeroki zakres rozmiarowy implantów

- wkręty 3,0mm w zakresie długości 16÷60mm
- wkręty 4,0mm w zakresie długości 30÷60mm
- długości stopniowane co 2mm

Zaprojektowane do techniki małoinwazyjnej

- ułatwione wprowadzenie przezskórne
- niewielki dostęp operacyjny
- ulepszona procedura operacyjna i lepsze wyniki

Ścięcie łba wkręta

- krawędź wkręta nie wystaje ponad powierzchnię kości, co istotnie ogranicza podrażnienie tkanek okołowszczepowych
- powierzchnia kontaktu z kością na całej długości łba wkręta – zwiększona wytrzymałość połączenia wkręt-kość

Otwór prowadzący

- precyzyjne wprowadzenie implantu

Gniazdo zmodyfikowany Torx

- kontrola pozycji ścięcia łba wkręta względem powierzchni kości – wymuszone ustawienie wkręta względem wkrętaka
- bardzo dobra funkcja samotrzymania wkręta
- polepszone przenoszenie momentu obrotowego

Zoptymalizowany profil gwintu

- efektywne wprowadzenie
- zwiększona wytrzymałość na wrywanie

Ostre zacięcia samowierzące

- ułatwione wprowadzenie wkręta
- skrócony czas zabiegu i efektywna procedura


Kompleksowe instrumentarium

- narzędzia kodowane kolorami - ułatwiona obsługa
- pełna gama narzędzi uzupełniających
- ergonomiczna konstrukcja narzędzi
- kompaktowy i przejrzysty statyw


ChM[®]
TRAUMA



www.chm.eu

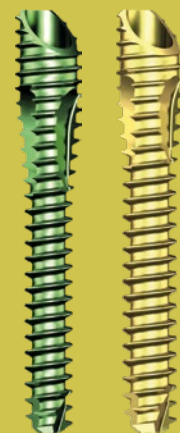

Wkręty 3,0mm i 4,0mm

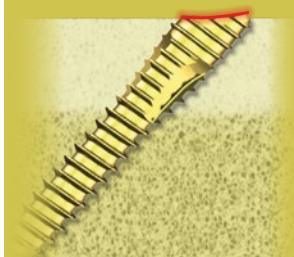

Ścięcie łba wkręta



Gniazdo zmodyfikowany Torx



Ostre zacięcia samogwintujące