




Instrumentarium do tylnej preparacji kręgosłupa lędźwiowego 15.0903.001

Zestaw specjalistycznych narzędzi znacznie upraszczających procedurę preparacji kręgosłupa lędźwiowego z dostępu tylnego

- 9 rodzajów odgryzaczy
- 10 rodzajów skrobaczek
- 2 pilniki
- 2 podważki do nerwów
- Podważka do kręgów
- Hak do nerwów
- Odgryzaczy Syfert i osteotom
- Nowoczesne kontenery



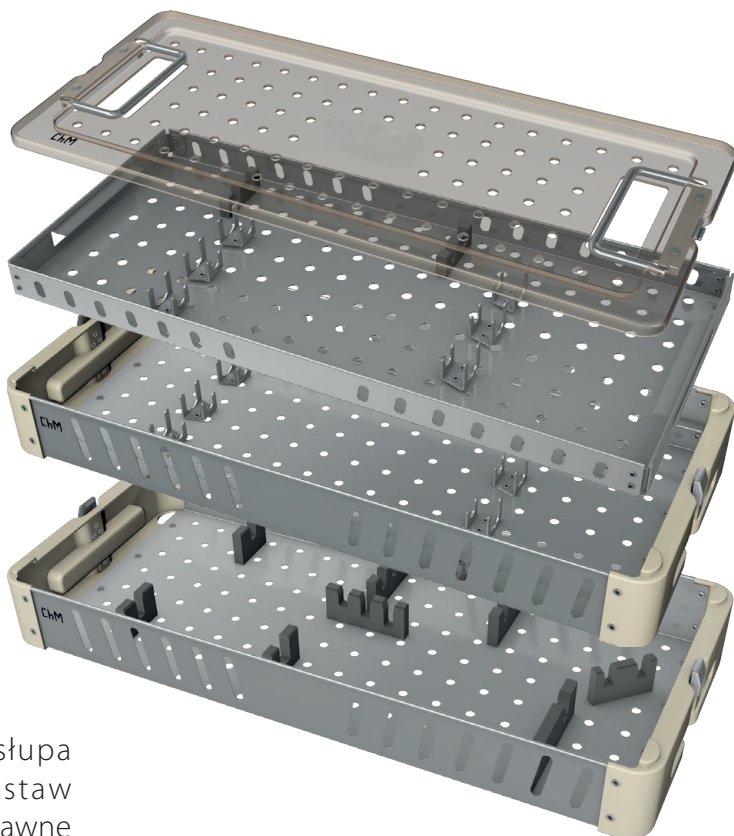

Instrumentarium do preparacji kręgosłupa lędźwiowego stanowi kompletny zestaw podstawowych narzędzi umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie laminektomii i dyscektomii. Skrobaczki, pilniki i odgryzacze dostępne są w wersji wygiętej i prostej, umożliwiając skuteczny dostęp do preparowanych tkanek. Optymalna długość narzędzi zapewnia odpowiednią widoczność podczas zabiegu, a silikonowe rękojeści zapewniają ergonomiczny chwyt.

Nr dokumentu ST-515A
Data wydania 20.08.2018
Data przeglądu P-000-03.10.2018

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.

Instrumentarium do tylnej preparacji kręgosłupa lędźwiowego

15.0903.001

Instrumentarium 1/3

15.0903.101



Pokrywa kontenera 9x4

14.0903.103

1

Kontener 9x4 H

14.0903.101

1



Osteotom

Ułatwia facetektomię, pomaga w usuwaniu osteofitów i struktur kostnych. Szerokość ostrza 8mm.

40.6191.000

1



Skrobaczka kostna owalna prawa

Odmiana odgięta, prawa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do przygotowywania płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania materiału krążków międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.5838.000

1



Skrobaczka kostna owalna lewa

Odmiana odgięta, lewa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do przygotowywania płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania materiału krążków międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.5839.000

1



Skrobaczka kostna prostokątna prawa

Odmiana odgięta, prawa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania materiału krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6194.000

1



Skrobaczka kostna prostokątna lewa

Odmiana odgięta, lewa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania materiału krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6195.000

1



Skrobaczka kostna lewa

Odmiana odgięta, prawa. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość ostrza 5,5mm.

40.6201.000

1



Skrobaczka kostna prawa

Odmiana odgięta, lewa. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość ostrza 5,5mm.

40.6200.000

1



Podwążka


Służy do przygotowywania płytek granicznych trzonu kręgowego.

40.5837.000

1

Instrumentarium 2/3



15.0903.102

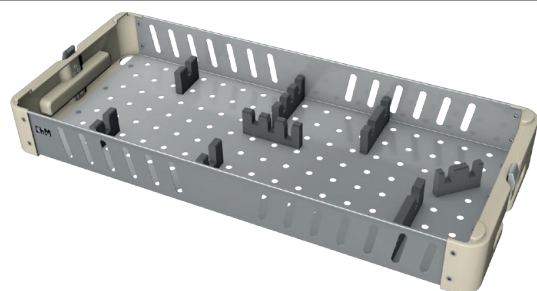


Kontener 9x4 H

14.0903.102

1

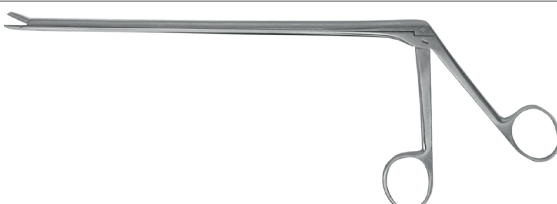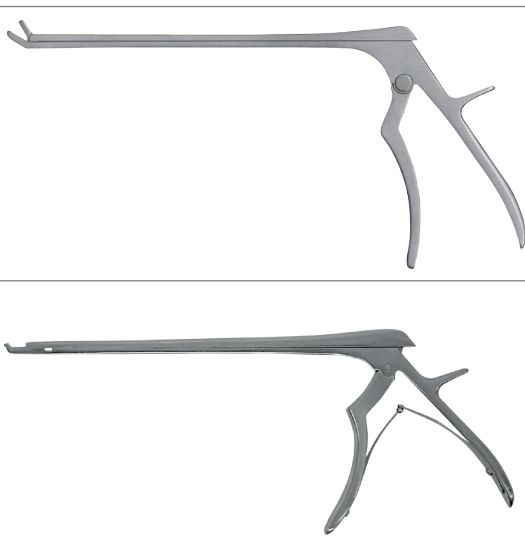	Odgryzacz CUSHING, prosty, 230 mm, 2 x10 mm Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 2mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich.	40.7027.042	1
	Odgryzacz SPURLING, prosty, 230 mm, 4x10 mm Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 4mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich.	40.7033.044	1
	Odgryzacz do neurochirurgii Ferris-Smith 6x10mm 23cm prosty Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 6mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich.	40.7150.046	1
	Odgryzacz CUSHING, w górę, 230mm, 2x10mm Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 2mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia narzędzia.	40.7028.042	1
	Odgryzacz SPURLING, w górę, 230mm, 4x10mm Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 4mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia narzędzia.	40.7034.044	1
	Odgryzacz do neurochirurgii Ferris-Smith 6x10mm 23cm zagięty do góry Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 6mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia narzędzia.	40.7151.046	1
	Odgryzacz Kerrison w górę 130° 2 mm Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość ostrza 2mm.	40.7086.002	1
	Odgryzacz Kerrison w górę 130° 4 mm Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość ostrza 4mm.	40.7086.004	1
	Odgryzacz Kerrison w górę 130° 6 mm Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość ostrza 6mm.	40.7086.006	1
	Odgryzacz kostny Sypert 8mm/360mm Jest używany do usuwania fragmentów kości lub innych zwartych tkanek. Szerokość ostrza 8mm.	40.3339.008	1

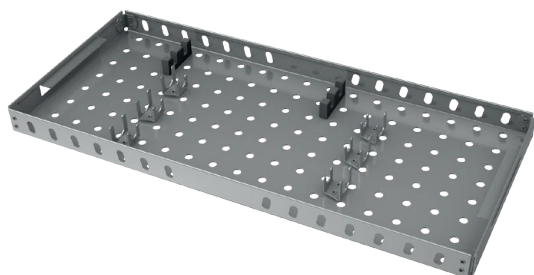

Paleta 9x4 1/2H

14.0903.201

1



Pilnik

Odmiana prosta. Ostrza tnące po jednej stronie. Służy do usuwania resztek tkanki chrzęstnej z płytek granicznych trzonów w celu odsłonięcia krwawiącej kości.

40.6196.000

1



Pilnik odgięty

Odmiana odgięta. Ostrza tnące po obu stronach. Służy do usuwania resztek tkanki chrzęstnej z płytek granicznych trzonów w celu odsłonięcia krwawiącej kości.

40.6197.000

1



Skrobaczka kostna

Odmiana prosta. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość ostrza 5,5mm.

40.6198.000

1



Skrobaczka kostna odgięta

Odmiana odgięta wstecznie. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Odgięcie ułatwia dostęp do całej powierzchni krążka międzykręgowego. Szerokość ostrza 5,5mm.

40.6199.000

1



Skrobaczka kostna owalna

Odmiana prosta. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do przygotowywania płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania materiału krążków międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6192.000

1



Skrobaczka kostna prostokątna

Odmiana prosta. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania materiału krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6193.000

1



Podważka 6mm

Jest przeznaczona do odciągnięcia i zabezpieczenia opony twardej rdzenia lub korzeni nerwowych.

40.4467.006

1



Podważka 10mm

Jest przeznaczona do odciągnięcia i zabezpieczenia opony twardej rdzenia lub korzeni nerwowych.

40.4467.010

1



Hak 4mm Cushing 28cm

Jest przeznaczony do retrakcji nerwów.

30.1010.000

1

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec Kościelny

Polska

tel. +48 85 86 86 130

fax +48 85 86 86 109

chm@chm.eu

www.chm.eu

