

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE


Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przeznaczonych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.

CHARFIX2 FN GWÓŹDŹ

3.6319.xxx; 3.6320.xxx
3.6321.xxx; 3.6322.xxx
3.6323.xxx; 3.6324.xxx
3.6343.xxx
3.6344.xxx
3.6345.xxx

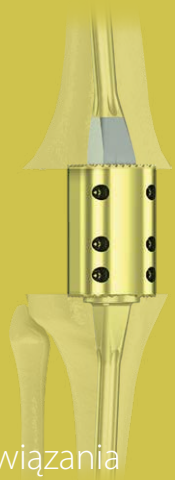

Dostarczamy rozwiązania
medyczne

ChM[®]
TRAUMA



CHARFIX2 FN GWÓŹDŹ

CHARFIX *system 2*

CHARFIX2 FN GWÓŹDŹ

Anatomiczna konstrukcja

- 4 wzdłużne kanałki, każdy co 90°, zmniejszające ciśnienie śródszpikowe i stabilizujące implant osiowo w kanale
- anatomiczne wygięcia implantu udowego i piszczelowego
- transfer obciążeń wzdłużnych poprzez dystans, bez udziału gwoździ
- implantacja z jednego dościa operacyjnego

Profil gwoździa

- stabilne i powtarzalne zawiasowe łączenie implantu piszczelowego z udowym, dodatkowo zabezpieczone specjalnymi śrubami
- implant piszczelowy posiada kołnierz stanowiący oparcie na powierzchni kości piszczelowej po wykonanej resekcji
- średnica gwoździ w zakresie 10÷12 mm
- prostokątny przekrój gwoździ w części przyłączeniowej jednakowy dla całego asortymentu
- implant udowy: wersja lewa i prawa
- lity (implant udowy i piszczelowy)
- znakowanie średnic kolorami ułatwiające identyfikację

Profil dystansu

- składa się z części górnej i dolnej (jedno- lub dwu-elementowej) łączonych za pomocą specjalnych śrub
- profilowane powierzchnie czołowe stanowią oparcie dla kości piszczelowej i udowej
- zastępuje usunięty staw kolanowy i zapewnia dodatkową stabilizację kończyny
- zakres długości dystansów zapewnia przywrócenie odpowiedniej długości kończyny po wykonanej resekcji

Wskazania

- artrodeza stawu kolanowego
- nieudana alloplastyka stawu kolanowego
- stan po infekcji
- złamania okoloartrozy
- stan pourazowy, który nie pozwala na implantację endoprotezy kolana
- guzy w rejonie stawu kolanowego
- utrata lub uszkodzenie aparatu wyprostnego
- zmiany onkologiczne

Elementy blokujące

- zacięcia samogwintujące
- nieblokowane w gwoździu
- średnica: 5 mm, lite

Otwory do blokowania gwoździa

- implant udowy i piszczelowy posiadają po dwa otwory pod wkręty blokujące (w tym jeden podłużny do blokowania dynamicznego)

