

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przemasadowych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.

PŁYTKI KLINOWE DO STOPY

3.7056.xxx
3.7057.xxx



Dostarczamy rozwiązania
medyczne

www.chm.eu

Nr dokumentu B/P-05
Data przeglądu P-001-10.08.2020

ChM[®]
TRAUMA



PŁYTKI KLINOWE DO STOPY

4.0 ChM Locked Plating
ChLPsystem

PŁYTKI KLINOWE DO STOPY

Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- dopasowana do szerokiego zakresu anatomii kości
- ułatwione anatomiczne nastawienie złamania

Szeroki wybór płytek

- system zawiera 2 rodzaje płytek:
 - płytkę X
 - płytkę T
- rozmiar klina od 2mm do 7mm

Zwężony koniec klina

- ułatwione wprowadzenie w miejsce osteotomii

Zaokrąglone krawędzie płytki

- zminimalizowane podrażnienia tkanek miękkich

4 anatomicznie skierowane wkręty

- zbieżne ustawienie - zwiększona stabilność płytki i zespolenia
- uniknięcie kolizji z powierzchnią stawową

Konstrukcja otworu blokowanego

- łby wkrętów nie wystają ponad powierzchnię płytki, co istotnie ogranicza podrażnienie tkanek okołowszczepowych
- zwiększona wytrzymałość połączenia gwintowego wkręt-płytkę
- dolne przetłoczenie zmniejsza powierzchnię kontaktu z kością

Otwory na druty Kirschnera


- tymczasowe pozycjonowanie płytki

Szeroki wybór wkrętów


- wkręty blokowane i blokowane zmiennokątowe VA umożliwiają użycie różnych konfiguracji w indywidualnych przypadkach

Wkręty zmiennokątowe VA


- wysokowytrzymały stop kobaltu
- kompatybilne ze wszystkimi otworami blokowanymi
- 30° zakres kątowy
- możliwość zmiany blokowania

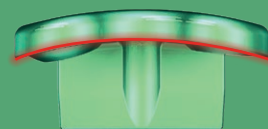

Anatomiczna konstrukcja

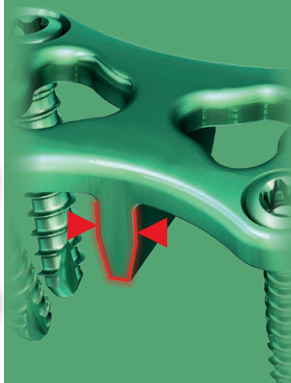

Zwężony koniec klina

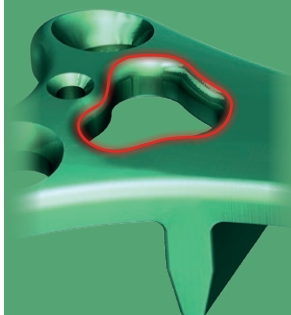

Otkno w części bliższej



Wkręty zmiennokątowe (VA)