

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przenasadowych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.


ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.



PŁYTKI KLINOWE PISZCZELOWE

3.7065.xxx; 3.7066.xxx

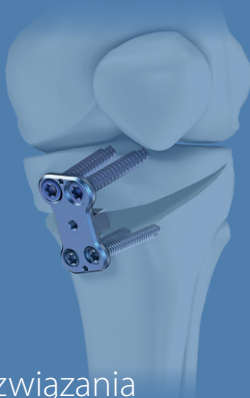

Dostarczamy rozwiązania
medyczne

www.chm.eu

Nr dokumentu B/P-09
Data przeglądu P-001-07.08.2020

PŁYTKI KLINOWE PISZCZELOWE

7,0 ChM Locked Plating
ChLP system

PŁYTKI KLINOWE PISZCZELOWE

Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- dopasowana do szerokiego zakresu anatomii kości
- ułatwione anatomiczne nastawienie złamania

Szeroki wybór płytek

- płytki lewe i prawe
- rozmiar klina od 3mm do 17,5mm

Fazowane krawędzie płytki

- zminimalizowane podrażnienia tkanek miękkich

4 anatomicznie skierowane wkręty

- otwory proksymalne kompatybilne z wkrętem gąbczastym 6,5mm, a dystalne z wkrętem 5mm
- rozbieżne ustawienie - zwiększona stabilność płytki i zespolenia
- uniknięcie kolizji z powierzchnią stawową

Konstrukcja otworu blokowanego

- łby wkrętów nie wystają ponad powierzchnię płytki, co istotnie ogranicza podrażnienie tkanek okołostawowych
- zwiększona wytrzymałość połączenia gwintowego wkręt-płytki
- dolne przetłoczenie zmniejsza powierzchnię kontaktu z kością

Otwory na druty Kirschnera

- tymczasowe pozycjonowanie płytki
- wskazują trajektorię wkrętów okołostawowych

