

Компания ChM разрабатывает и распространяет передовые продукты в трех категориях:

ChM[®]
TRAUMA

ChM[®]
TRAUMA

Комплексный портфель продуктов для травматологии, включая системы для фиксации переломов и коррекцию деформации конечностей и таза.

ChM[®]
SPINE

Широкий спектр передовых изделий для стабилизации шейного и грудно-поясничного отделов позвоночника, включая системы транспедикулярной фиксации как открытым, так и малоинвазивным способом, различные межпозвоночные имплантаты и пластины.


ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Изделия медицинского назначения и имплантаты для черепной и челюстно-лицевой хирургии, предназначенные для лечения переломов, реконструктивных, дистракционных и ортогнатических операций.



ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПРОКСИМАЛЬНЫЕ

3.4034.6xx

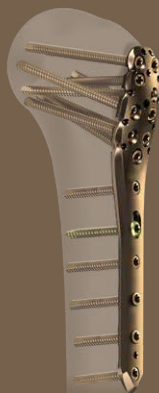

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
ПРОКСИМАЛЬНЫЕ



Предоставляем
медицинские
решения

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПРОКСИМАЛЬНЫЕ

Анатомический дизайн

- оптимизированный анатомический профиль
- соответствует широкому спектру анатомических особенностей
- содействует анатомическому восстановлению

Укрепленная длинная пластина

- увеличенная толщина шейечного компонента пластины
- предназначена для переломов шейки плеча

Разностная толщина пластины

- минимизирует раздражение мягких тканей эпифизарной части
- высокая прочность пластины в метаэпифизарной части

Фаска снята с граней пластины

- минимизирует раздражение мягких тканей
- снижает нагрузку на прилегающую костную ткань

Выборки ограничивающие контакт пластины с костью

- ограниченный контакт системы пластина-кость
- улучшенное кровоснабжение окружающих имплантат тканей

Скошенный конец

- легкое малоинвазивное введение

Деять анатомически направленных проксимальных винтов

- улучшенная фиксация в остеопорозной кости
- улучшенная фиксация при многооскольчатых переломах

Шаблон накладка

- быстрое, беспроблемное введение винтов в заданных направлениях

Дизайн блокируемых отверстий

- головки винтов не выступают над поверхностью пластины, что значительно снижает раздражение мягких тканей
- улучшенное соединение в системе винт-пластина
- выступы в наконечной части пластины снижают контакт винтов с костью

Компрессионные отверстия

- овальные отверстия для позиционирования пластины
- компрессия в двух направлениях

Отверстия для спиц

- временная фиксация пластины спицами
- проксимальные отверстия подходят для подшивания мягких тканей

Различные варианты блокирования пластины

- неблокирующие, блокирующие и блокирующие винты с переменным углом для индивидуального подхода к операционной ситуации

Винты блокирующие с переменным углом

- надежный кобальтовый сплав
- совместимы со всеми блокируемыми отверстиями
- угол введения 30 градусов
- возможность перепроведения блокирующего винта с переменным углом

